

Bis zu
**30%
leichter**
bei gleichem
Bleigleichwert


Komfortabel & sicher geschützt

Strahlenschutzkleidung
und Zubehör



Kostüme und Mäntel

Unsere Strahlenschutz-Kostüme und Mäntel bieten optimale Bewegungsfreiheit, da das Gewicht gleichmäßig auf Schultern und Hüfte verteilt wird. Sie werden mit großen Klettverschlüssen befestigt und verfügen über eine praktische Tasche.

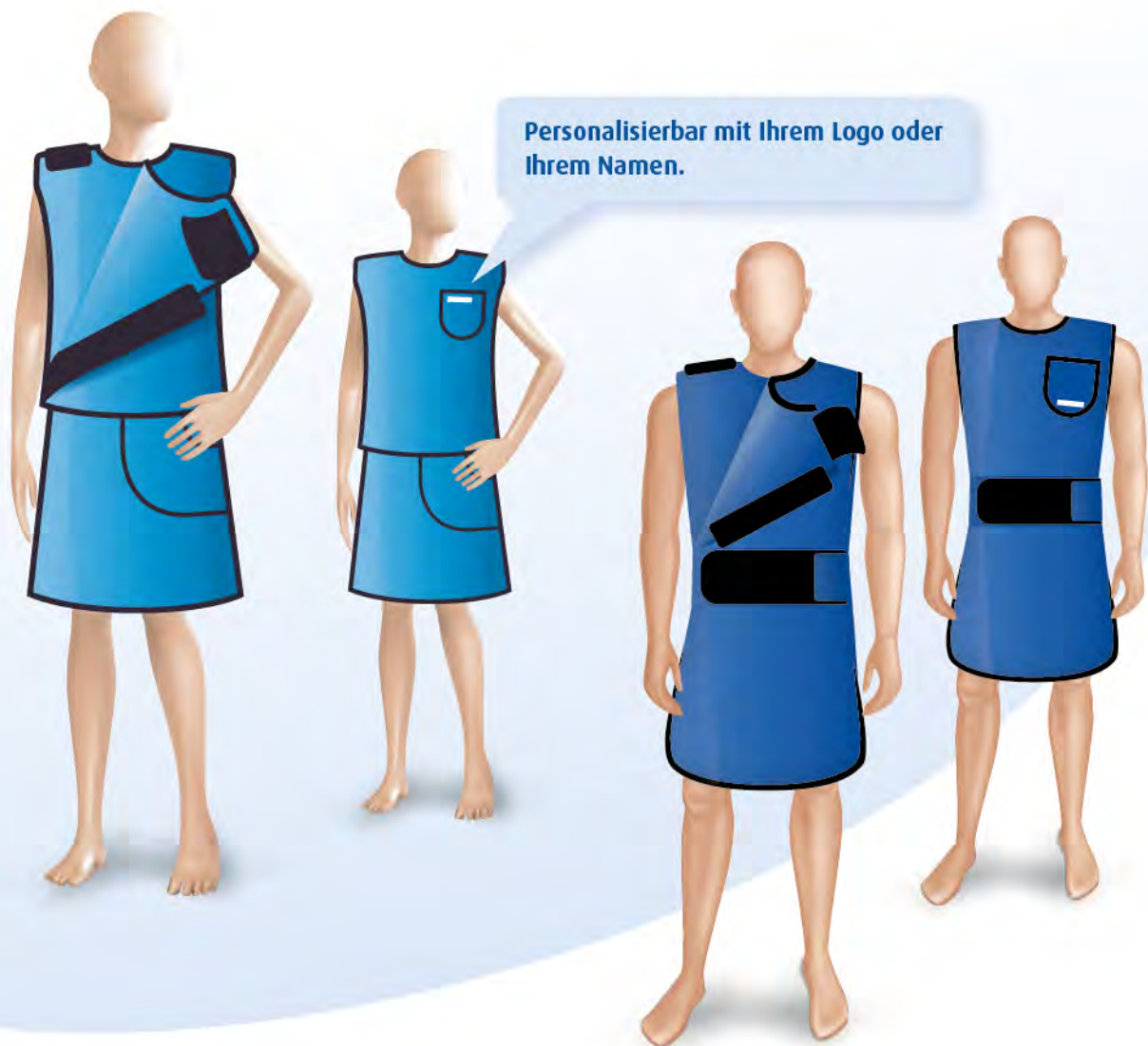

Die Vorteile im Überblick:

- ✓ Bis zu 30% weniger Gewicht bei gleichem Bleigleichwert
- ✓ Erhältlich in den Größen S-XL
- ✓ Rock und Weste in verschiedenen Größen kombinierbar
- ✓ Erhältlich in Bleiäquivalenz von 0,35 mm Pb oder 0,50 mm Pb
- ✓ Personalisierbar
- ✓ Einfaches Anlegen durch Klettverschlüsse
- ✓ Mit komfortablen Schulterpolstern
- ✓ Bequem auch bei längerer Anwendung

Transatlantic – Ihr Experte für Strahlenschutz

Unsere Strahlenschutzkleidung wird gemäß den neusten Technologien, Anforderungen und Normen produziert. Dabei achten wir auf ein leichtes Material, das Sie optimal schützt und lange hält.

Um die am stärksten von Strahlen betroffenen Körperregionen wie Brust, Oberkörper, Gonaden und Schilddrüse bestmöglich zu schützen, empfiehlt es sich als Anwender, die passende Strahlenschutzkleidung entsprechend der eigenen Bedürfnisse auszuwählen.

Die folgenden Punkte sind für die optimale Passform Ihrer Strahlenschutzkleidung zu beachten:

Die Schürze bzw. der Rock sollte Ihre Knie vollständig bedecken. Der Armausschnitt sollte so klein wie möglich und nur so groß wie nötig sein.



30% weniger Gewicht gleicher Bleigleichwert



Bleifrei / bleireduziert



Schnelle Lieferzeit



Personalisierbar



Zertifiziert

Bleireduziert

Das Innenmaterial der bleihaltigen Kleidung besteht aus einer Polymer-Blei Verbindung. Dabei ist es ca. 30% leichter als vergleichbare Produkte auf dem Markt und hat dennoch die gleiche Schutzwirkung.

Bleifrei

Unser bleifreies Material ist umweltschonend und kann recycelt werden. Das Material besteht aus Schwermetallen. Somit haben Sie den sicheren Strahlenschutz herkömmlicher Röntgenkleidung ohne die Nachteile (hohes Gewicht, Entwicklung von Eigenstrahlung,..) von Blei. Zudem sind auch die bleifreien Artikel ca. 30% leichter als herkömmliche, bleihaltige Strahlenschutzkleidung.



Light Blue



Dark Blue



Bordeaux



Tiger



Shining Star



JungleBlack



Lovely Animals



Zoo Park



Cute Panda



Sky Blue



Titan Silver



Cherry Red



Atlantic Blue



Burgundy Red



Tangerine Orange



Violet Purple



Lemon Yellow



Emerald Green



Candy Pink


STRAHLENSCHUTZWIRKUNG

Die Strahlenschutzwirkung beider Materialien bei 80 kV ist:

99% bei 0,5 mm Pb
97% bei 0,35 mm Pb
95% bei 0,25 mm Pb

Schilddrüsen- und Linsenschutz

Sowohl die Schilddrüse als auch die Augen sind sehr strahlenempfindlich und müssen daher zuverlässig geschützt werden.

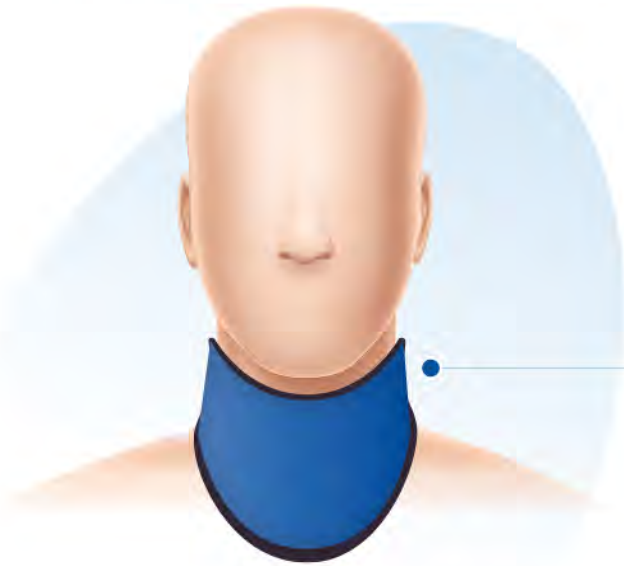


Schilddrüsenschutz

Schützt Patienten und Anwender. Zum Schutz der Schilddrüse und des Sternum, in Ergänzung zur Röntgenschutzschürze. Halsumfang: 38-45 cm (Kappenform).

Schutzbrille

Die Schutzbrille für Sekundärstrahlung ist speziell für Personen entwickelt, die regelmäßig ionisierender Strahlung ausgesetzt sind. Die Brille schützt die Augen vor schädlicher Strahlung und reduziert das Risiko von Augenschäden. Sie ist robust und komfortabel zu tragen

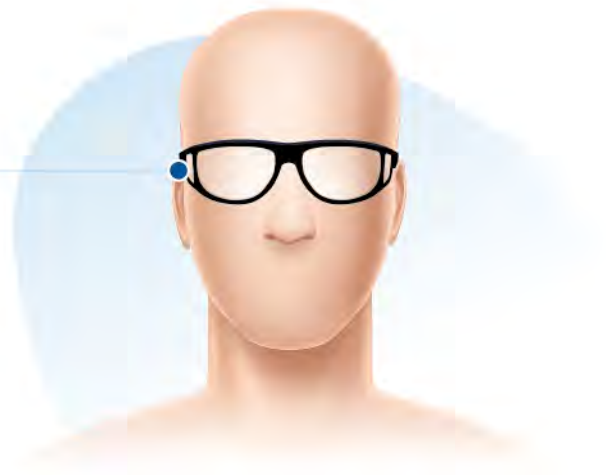

Linsenschutz

Das Produkt bietet einen zuverlässigen Schutz für die Linse des Patienten und ist aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit an jede Gesichtsform geeignet.

Die Vorteile im Überblick sind:


- ✓ Brillen und Schilddrüsenschutz in verschiedenen Formen und Größen erhältlich
- ✓ Schilddrüsenschutz bleireduziert oder bleifrei verfügbar
- ✓ Für Anwender und Patienten geeignet

Decken und Schutzwände

Sicherer Schutz für Anwender und Patienten durch die stabilen und flexibel einsetzbaren Decken und Schutzwände.

Decken

- ✓ Von 60 x 60 cm bis 120 x 60 cm
- ✓ Pb bleifrei & bleireduziert
- ✓ Erhältlich in 0,35 mm Pb und 0,5 mm

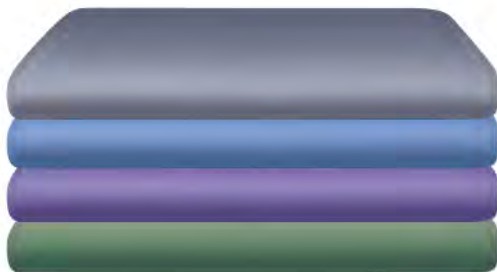

Schutzwände

Erhältlich in 2,0 mm Pb



Die Vorteile im Überblick sind:

- ✓ Auswahl an verschiedenen Größen
- ✓ Geeignet für alle Bereiche der Radiologie
- ✓ Schützt zuverlässig Anwender und Patienten
- ✓ Schutzwände mit großem und kleinem Fenster verfügbar

Über Transatlantic

Eine zuverlässige Zusammenarbeit basiert auf Vertrauen. Deshalb ist es uns wichtig, dass Sie einen Partner an Ihrer Seite haben, dem Sie auch vertrauen können. Bei Transatlantic sind wir seit über 85 Jahren darauf spezialisiert, unsere Kunden zu beraten und zu unterstützen.

Unsere Mission ist es, eine bessere, individuellere und effizientere medizinische Versorgung für Patienten und Anwender zu schaffen. Unsere qualifizierten Medizinprodukteberater stehen Ihnen zur Verfügung, um Sie bei der Auswahl der für Sie passenden Produkte kompetent zu unterstützen und zu beraten.

www.transatlantic.de



Transatlantic
Handelsgesellschaft
Stolpe & Co. mbH

Siemensstraße 7
61267 Neu-Anspach

Telefon: 06081 943050
Fax: 06081 943080

Mail: info@transat.de
www.transatlantic.de