


# Nasale Sondenfixierung

Das Einsetzen von Nasal- und Magensonden ist eine häufige Anwendung in Krankenhäusern. Die Sonde wird dabei durch die Nase des Patienten in den Magen geschoben. Deswegen muss die Sonde sicher auf dem Nasenrücken des Patienten fixiert werden. Unser Transafix Nasal Fixiersystem bietet dafür die perfekte Lösung.

Die Kombination von Nasalhalter, erhältlich in hautfarbenem Vlies oder Hydrocolloid, und dem Nasalband macht das System einsatzbereit.

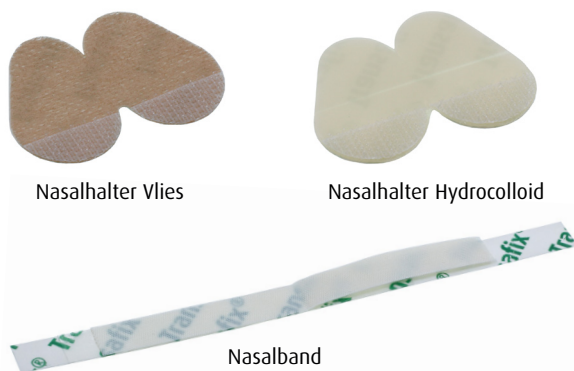

Nasalhalter Vlies

Nasalhalter Hydrocolloid

Nasalband

Beide Komponenten sind durch einen sicheren Klettverschluss verbunden. Dadurch muss nur das Nasalband ausgetauscht werden, wenn die Nasal- oder Magensonde gewechselt wird. Der Nasalhalter kann 3-5 Tage auf der Nase bleiben. Dies reduziert Hautirritationen und Entzündungen und beugt einer intensiven Nachpflege vor.

## Fixiersystem Nasal

### Transafix, 1 Nasalhalter aus Hydrocolloid, steril

Artikel-Nr. 8200100

### Transafix, 1 Nasalhalter aus Vlies, steril

Artikel-Nr. 8200200

### Transafix, 1 Nasalband, steril

Artikel-Nr. 8200300

Sowohl Vlies als auch Hydrocolloid sind sehr hautverträglich. Bei sehr sensibler Haut empfehlen wir den Gebrauch des Hydrocolloid Nasalhalters.



Anwendungsbeispiel

Die Nasalhalter und -bänder sind in einer praktischen Spenderbox zu je 25 Stück erhältlich. So kann das Produkt den individuellen Bedürfnissen des Patienten angepasst werden.

## Vorteile im Überblick

- Einfache Handhabung
- Anpassbar an Bedürfnisse des Patienten
- Praktische Spenderbox
- Einfaches Entfernen ohne Rückstände
- Maximaler Patientenkomfort
- Hautschonend, auch bei sensibler Haut
- Höchster Qualitätsstandard

## Nasale Sondenfixierung

## Auf einen Blick

Intensivstation

Häusliche Pflege

Neonatalogie

- Einfaches Verbinden und Trennen von Nasalhalter und Nasalband durch Klettverschluss.
- Nasalhalter wird bei Sondenwechsel NICHT entfernt, nur das Nasalband wird ausgetauscht.
- Sonde ist beweglich, dadurch wird Dekubitus an der Naseninnenwand vorgebeugt.


**Anwendungsgebiete:**

Ernährungs sonden, Sauerstoffsonden, etc.

**Liegedauer:**

Vlies ca. 3 Tage, Hydrocolloid ca. 5 Tage, Nasalband nach Bedarf

## Befestigung des Nasalbandes an der Sonde

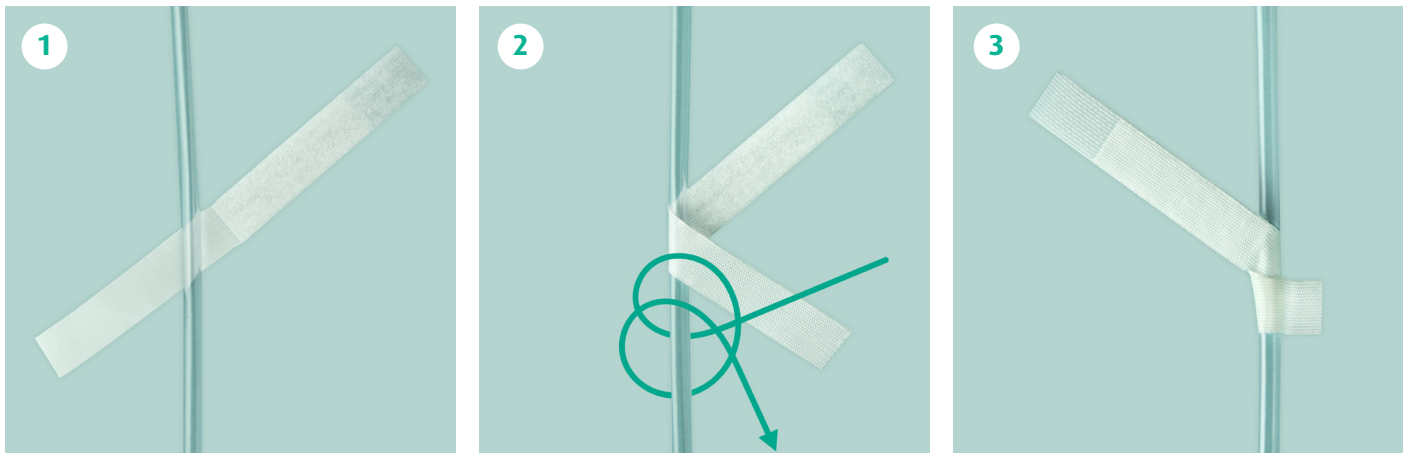


## Produktabbildungen in Originalgröße

**Transafix, 1 Nasalhalter aus Hydrocolloid, steril**

Artikel-Nr. 8200100

**Transafix, 1 Nasalhalter aus Vlies, steril**

Artikel-Nr. 8200200

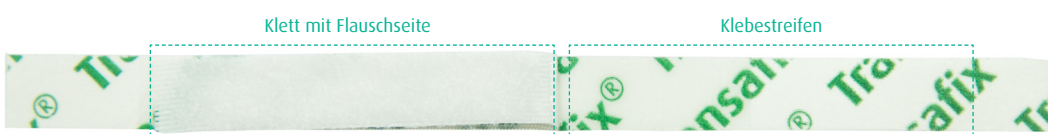**Transafix, 1 Nasalband, steril**

Artikel-Nr. 8200300